

## CITOLOGINIO GIMDOS KAKLELIO TYRIMO (PAP) MEDŽIAGOS PAĖMIMO IR SIUNTIMO TIRTI INSTRUKCIJA V2.0

*Instrukcija apima įprasto ginekologinio tepinėlio (PAP) paruošimą bei mėginio paėmimą į skystąją terpę (PAPst) plonasluoksniame tepinėliu su galimybe iširti žmogaus papilomos virusus (ŽPV) ir lytiškai plintančias infekcijas (LPI)*

### INFORMACIJA PACIENTEI IR GYDYTOJUI:

1. LAIKAS: 2 savaitės nuo pirmosios paskutinių mėnesinių dienos (10-20 mėnesinių ciklo diena).
2. NENAUDOTI tamponų, intravaginių preparatų, vengti lytinių santykių, neplauti makšties 48 val. prieš tyrimą.
3. NENAUDOTI acto rūgšties ir liugolio tirpalų prieš tepinėlio paėmimą.
4. NUVALYTI medvilnės tamponu gleivių ir paviršinio eksudato perteklių nuo gimdos kaklelio.
5. SUVILGYTI makšties skėtiklį prieš imant medžiagą PAP tik šiltu vandeniu.
6. PAĖMIMO METODAI: medžiaga PAP tyrimui imama pasirinktinai vienu iš šių būdų:
  - a. Mentelė ir šepetėliu. Šepetėlis **nerekomenduojamas** nėštumo metu.
  - b. Šluotele (vienu metu paimama medžiagos nuo egzo ir endocervikinės gimdos kaklelio srities).
  - c. BD SurePath™ šluotele skystajai terpei (žiūr. kitame puslapyje): plonasluoksniame tepinėliu ir/ar ŽPV tyrimui (genotipavimui), ir/ar LPI nustatymui (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae).
7. FIKSAVIMAS: tepinėliai paruošti A ir B būdais (žiūr. žemiau) nedelsiant fiksuojami vienu iš šių metodų: aerosoliniais-purškiamaisiais fiksuojamais arba 96% etanoliumi.

### CITOLOGINIO TEPINĖLIO PARUOŠIMO BŪDAI

#### A. TEPINĖLIO PARUOŠIMAS NAUDOJANT MENTELĘ IR ŠEPETĖLĮ



1. Kai medžiaga imama mentelė ir šepetėliu, pirma naudojama mentelė.
2. Ilgesnis mentelės galas įvedamas į gimdos kaklelio žiotis. Mentelė sukama vieną kartą visu gimdos kaklelio paviršiumi, gauta medžiaga braukiamuoju judesiu paskleidžiama vienos objekcinio stiklelio pusės dalyje ir nedelsiant fiksuojama (1).
3. Vėliau naudojamas šepetėlis. Jis kišamas į endocervikinį kanalą, kad būtų matomi galiniai jo šereliai, pasukamas 1/4 – 1/2 gimdos kaklelio kanalo paviršiaus (sukant visu gimdos kaklelio kanalu, sukeliamas kraujavimas).
4. Gauta medžiaga nuo šepetėlio ritinamuoju judesiu švelniai paskleidžiama likusioje tos pačios stiklelio pusės dalyje ir nedelsiant fiksuojama (2).



Pavardė: Vardas:	Egzo Cervix (1)	Endo Cervix (2)

## B. TEPINĖLIO PARUOŠIMAS NAUDOJANT ŠLUOTELĘ

1. Ilgieji šluotelės šereliai įvedami į endocervikinį kanalą taip, kad šluotelės trumpieji šereliai kontaktuoti su išorine gimdos kaklelio dalimi.
2. Šluotelė sukama 3-5 kartus pagal laikrodžio rodyklę.
3. Paimta medžiaga nuo abiejų šluotelės pusių piešiamuoju judesiu paskleidžiama ant stiklelio ir **nedelsiant** fiksuojama.

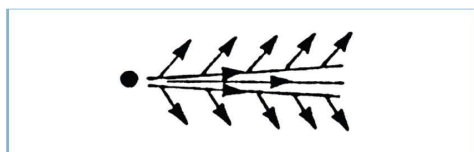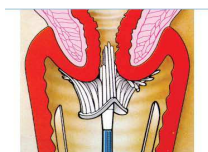

Pavardė:	Egzo/endo cervix
Vardas:	

## C. MĖGINIO PAĖMIMAS Į SKYSTĄJĄ TERPĘ NAUDOJANT BD SurePath™ ŠLUOTELĘ

1. BD SurePath™ ilgieji šluotelės šereliai įvedami į endocervikinį kanalą taip, kad šluotelės trumpieji šereliai kontaktuoti su išorine gimdos kaklelio dalimi. Šluotelė sukama 3-5 kartus pagal laikrodžio rodyklę.
2. **Šluotelės galvutė turi būti nuimama nuo kotelio ir įmetama į skystąją terpę „BD SurePath™“.**
3. Ant indelio su terpe ir šluotele arba maišelio, į kurį įdedama tiriamoji terpė, užrašyti pacientės vardą ir pavardę.
4. Mėginys siunčiamas į laboratoriją (indelį su mėginiu galima laikyti kambario temperatūroje iki 4 sav., šaldytuve (+4 °C) – iki 6 mėn.).

**Dėmesio: BD SurePath™ šluotelės negalima naudoti nėščioms pacientėms po 10 nėštumo savaitės!**



### SIUNTIMO ATLIKTI PATOLOGIJOS TYRIMĄ (SAM forma Nr. 014-1-1/a, 2014 12 23) PILDYMO REIKALAVIMAI

#### Siuntime pažymėti:

1. Vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą.
2. Tepinėlio fiksacijai naudojamą fiksuojamą medžiagą.
3. Klinikinę diagnozę.
4. Siunčiant BD SurePath terpėje nurodyti pageidaujamus testus (Citologija arba PAPst; ŽPV; LPI)
5. Paskutinių mėnesinių datą ar klimakterinį periodą.
6. Hormoninių preparatų, kontraceptinių priemonių vartojimą.
7. Makroskopinius gimdos kaklelio pokyčius.
8. Anksčiau atliktus patologijos ar molekulinis tyrimus.
9. Taikytą spindulinį ar chemoterapinį gydymą.

#### INFORMACIJA TEIKIAMA:

elektroniniu paštu: info@vpc.lt arba  
Centro telefonais:

8 52477351 (Tiriamosios  
medžiagos priėmimas);

8 52477350 (Informacija).